

Jak korzystać z termometru?


- 1 Naciśnij przycisk "°", aby włączyć termometr.




- 2 Trzymaj termometr w odległości 0-3 cm od czoła.



- 3 Rozpocznij pomiar krótkim naciśnięciem przycisku "°"

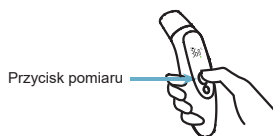

- 4 Sygnał dźwiękowy oznacza zakończenie pomiaru, można odczytać wartość na wyświetlaczu

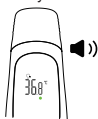


- 5 "- - -" pomiar nieudany

Możliwe przyczyny:

- A. Odległość pomiaru jest większa niż 0-3 cm;
B. Zmierzona temperatura jest niższa niż 32°C.

*Nie używaj trybu czoła do pomiaru temperatury pomieszczenia/obiektu.

Poczekaj, aż sygnał dźwiękowy ustanie całkowicie przed sprawdzeniem wartości temperatury.

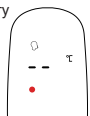

- 1 Tryb wyciszenia

Gdy termometr jest włączony, przytrzymaj krótko przycisk "pamięć, włącz/wyłącz wyciszenie" "M", gdy na ekranie pojawi się "M", to termometr przełączył się w tryb wyciszenia.

Ponowne przyciśnięcie "M", wyłączy wyciszenie (domyślnie wyciszenie jest wyłączone)



- 2 35 wyników w pamięci

Gdy termometr jest wyłączony, krótko naciśnij "M", aby przejść do trybu pamięci. Naciśnij "M" ponownie, aby sprawdzić 35 wyników jeden po drugim.

Jeśli nie ma wartości, wyświetli się " - - - Mem".

- 3 Zmierz temperaturę pomieszczenia/obiektu


Gdy termometr jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj "M" przez 3 sekundy, a następnie naciśnij przycisk pomiaru, aby zmierzyć temperaturę pomieszczenia lub obiektu. Trzymaj termometr około 1-3 cm od obiektu. Naciśnij przez około 1 sekundę, do usłyszenia sygnału dźwiękowego, po czym możesz odczytać wartość pomiaru.



- 4 Przełącz na tryb dziecka

Użyj przełącznika z boku aby przełączyć między trybami dziecko/dorosły.

Tryb dziecka jest odpowiedni dla dzieci w wieku 0-36 miesięcy.

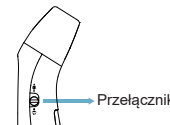

- 5 °F / °C Zmiana

1. Otwórz pokrywę baterii.

2. Użyj przełącznika, aby przełączyć pomiędzy °C/°F.

